



Estufa de aire forzado TCF 200 SUPER



Características principales

- Incluye certificado de calibración a 150°C trazable ENAC.
- Clase de Seguridad 3.1 con dispositivo independiente electromecánico incluido en el precio.
- Bajo consumo eléctrico.
- Pantalla a color táctil.
- Programador de rampas de temperatura y ventilador.
- Velocidad de ventilación ajustable y programable según necesidad del usuario.
- Salida de humos trasera de 32mm, y orificio superior para sonda de temperatura externa.
- Interior de acero INOX 304.
- Posibilidad de validación IQ/OQ.



Características técnicas

AIRE FORZADO	
TCF 200 SUPER	
Volumen	200 litros
Temp. Máx. / Resolución	+ 300 / 0.1 °C
Homogeneidad de la temperatura a 150°C	± 2 %
Variación a 150°C	± 0.4°C
Tiempo de calentamiento a 150°C	30 min.
Temporizador	99:59 hh:min y continuo
Seguridad clase	3:1
Estantes incluidos / máximo	2 / 9
Distancia útil entre estantes	50 mm
Carga máxima por estante (kg)	20kg
Alimentación / potencia	230 V / 2400 W
Dimensiones externas (Largo x Fondo x Alto)	945 x 755 x 870 mm
Dimensiones internas (Largo x Fondo x Alto)	645 x 495 x 650 mm
Peso	103 kg




Todo de un vistazo



¡Fácil de utilizar, incluso con guantes!



8 programas

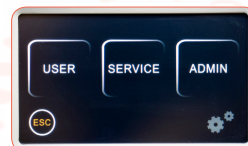

Seguridad



Datalogger integrado para el almacenaje de datos

Como pedirlo

Cat nº	Descripción
G-TCF200-SP	Estufa de aire forzado TCF200 SUPER, de 200 litros, rango de +5°C T ambiente hasta 300°C / 0.1°C. Controlador digital con 7 programas x 10 pasos. Seguridad 3.1, 2 estantes incluidos. Certificado trazable a 150°C