



TERMOSTATOS DE BLOQUE METÁLICO EN SECO

CON REGULADOR ELECTRÓNICO DIGITAL DE LA TEMPERATURA Y DEL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO.

SEGURIDAD: NORMA EN 61010. LIMITADOR FIJO DE SOBRECALENTAMIENTO INCORPORADO.

Gran precisión. Exentos de contaminación.


APLICACIONES

En el laboratorio clínico, bioquímico y químico. Incubación de D.N.A., ensayo de enzimas, test de residuos para leche, incubación y fusión de AGAR, cultivos celulares. Termorregulación, secado, ebullición, evaporación, concentración, hidrólisis, digestión, etc.

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Sistema de termostatación en seco que presenta importantes ventajas sobre los de transmisión de calor por fluido como son: sin contacto con líquidos, ausencia de evaporaciones, temperaturas más altas de trabajo, prolongada estabilidad y carencia de gérmenes contaminantes.

Calibración digital del circuito de temperatura. Tiempo de funcionamiento de 1 a 999 minutos o en continuo. Alarma de sobretemperatura. Elementos calefactores distribuidos homogéneamente en la superficie de contacto. Regulador electrónico digital de la temperatura y del tiempo de funcionamiento (3 dígitos). Sonda Pt 100. Bloques intercambiables en aleación DURAL, tratados químicamente, para varios diámetros de tubos estándar o especiales según sus necesidades. Mueble exterior metálico con encimera en acero inox. AISI 304.

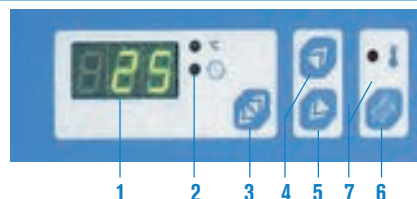


PANEL DE MANDOS

1. Display digital indicador de temperatura y tiempo en minutos.
2. Indicador del parámetro visualizado. (Tiempo o temperatura).
3. Pulsador para seleccionar el parámetro visualizado.
4. Pulsador para aumentar el parámetro.
5. Pulsador para disminuir el parámetro.
6. Pulsador marcha-paro.
7. Indicador de alarma de sobretemperatura.



Termostato de bloque metálico para tubos "Tembloc"

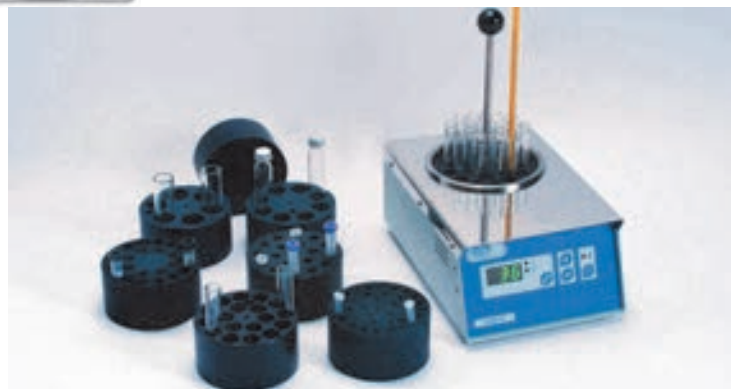

ACCESORIOS

Bloques metálicos, de 105 Ø x 55 mm alto.

Código

- 7000346** Para 34 tubos de 6 mm Ø.
 - 7000714** Para 18 tubos de Eppendorf de 1,5 ml.
 - 7001224** Para 24 tubos de 12 mm Ø.
 - 7001618** Para 18 tubos de 16 mm Ø.
 - 7000208** Para 8 tubos de 20 mm Ø.
 - 7000256** Para 6 tubos de 25 mm Ø.
 - 7000715** Bloque ciego sin orificios para tubos especiales bajo demanda.
- El precio de este bloque tiene un suplemento que dependerá del número de orificios que se realicen.

MODELO

Código	Temperatura °C	Estabilidad °C	Homogeneidad %	Error de lectura %	Resolución °C	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm	Consumo W	Peso Kg
7462200	30 - 200	±0,75	±1,5	±2	1	11 19 29	350	3,7

Se suministra con termómetro lector 0-200 °C y varilla para la extracción de los bloques metálicos.



Termostato de bloque metálico para tubos "Multiplaces"

CAPACIDAD: TRES BLOQUES.



ACCESORIOS

Bloques metálicos, de 55 alto x 95 ancho x 75 mm fondo.

Código

- 7000306** Para 30 tubos de 6 mm Ø (total 3 bloques = 90 tubos).
- 7000716** Para 20 tubos Eppendorf de 1,5 ml (total 3 bloques = 60 tubos).
- 7031220** Para 20 tubos de 12 mm Ø (total 3 bloques = 60 tubos).
- 7031612** Para 12 tubos de 16 mm Ø (total 3 bloques = 36 tubos).
- 7003208** Para 8 tubos de 20 mm Ø (total 3 bloques = 24 tubos).
- 7001256** Para 6 tubos de 25 mm Ø (total 3 bloques = 18 tubos).
- 7000717** Bloque ciego sin orificios para tubos especiales bajo demanda.
- 7001474** Bloque para 15 cubetas de 10 x 10. Capacidad: 3 bloques.
- 7001475** Bloque para 96 microplacas de 1,2 ml. Capacidad: 1 bloque.

MODELO

Código	Temperatura °C	Estabilidad °C	Homogeneidad %	Error de lectura %	Resolución °C	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm	Consumo W	Peso Kg
7471200	30 - 200	±0,75	±1,5	±2	1	11 31 31	700	7,4

Se suministra con termómetro lector 0-200 °C y varilla para la extracción de los bloques metálicos.